

CHLORAXID 2%

Жидкость для промывки корневых каналов

CE 2409

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

УПАКОВКА:

Бутылочки 200 г, 400 г

Состав: гипохлорит натрия, вода Евр. Фарм.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Во время механического расширения канала удаляет неживые остатки пульпы.

Очищает канал и одновременно удаляет замазанные слои, чтобы обработать отверстия зубных каналов перед заполнением.

Предотвращает обесцвечивание зубов, которое может происходить после заполнения зубных каналов, которые не были промыты.

Адаптер с поршнем для набора жидких препаратов в шприц

1. Открутить крышку бутылочки.

2. Поместить адаптер в горлышко бутылки и плотно вдавить.

3. Чтобы привести в готовность, удалить синюю пробку. Закрутить конец шприца в отверстие адаптера, наклонить бутылочку с препаратом вниз головой и набрать жидкость в шприц, удерживая одновременно адаптер. Затем поставить бутылочку головой вверх на стол и аккуратно выкрутить шприц из адаптера. Рекомендуется использовать шприц с наконечником Люэра с резиновым поршнем.

5. Для переноски снять адаптер и закрутить крышку бутылочки на бутылочку.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Ввести жидкий CHLORAXID 2% в корневой канал с помощью шприца с иглой с боковым отверстием. Обильно промыть канал, примерно 10 мл на один канал. Содержащийся в продукте гипохлорит натрия немедленно активируется в контакте с органическим веществом. Если концентрация гипохлорита натрия уменьшается, время промывки и объем должны обязательно одновременно повышаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Во время обработки корневого канала не использовать слишком сильный поток жидкости, поскольку это может вызвать проникновение жидкости в околоверхушечные ткани и повредить их, что характеризуется болью и набуханием мягких тканей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! CHLORAXID 2% может раздражать мягкие ткани полости рта, глаза и кожу.

При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны.

Рекомендуется использовать персональное защитное оборудование (очки, защитный козырек, перчатки). Избегать контакта с глазами, мягкими тканями ротовой полости и кожей. При случайном контакте промыть большим количеством воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять CHLORAXID 2% для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре при температуре 2 – 8°C (в холодильнике).


Хранить в плотно закрытой упаковке. Защищать продукт от солнечного света. Хранить в недоступных детям местах.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Производитель продукта допускает транспортировку продукта в течение периода не более 10 дней при температуре, не превышающей 40°C. Короткий период перевозки в данном диапазоне температур не влияет на безопасность и эффективность продукта в период его срока годности.

Не использовать продукт после срока годности, показанного на упаковке. После открытия упаковки срок годности не изменяется, если продукт тщательно закрывается после каждого использования.

Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.

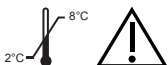

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 0048 15 842-35-85